



FSAT

Outil d'auto-évaluation des MGF/E

Guide utilisateur

Instructions pour un usage clinique ou personnel

INTRODUCTION

Ce guide explique comment utiliser FSAT, aussi bien en tant que professionnel de santé¹ qu'en tant que tout public. L'outil est conçu pour favoriser la communication, l'éducation, le dépistage et le recueil de données dans le cadre de consultations ambulatoires, ainsi que pour sensibiliser le public, tout en améliorant l'accès à l'information, les soins et la documentation. Il peut également être utilisé pour des études de prévalence. Il comporte des illustrations à l'aquarelle réalisées par Florine Guenat, basées sur une sélection de photographies tirées de :



Abdulcadir J, Sachs Guedj N, Yaron M, editors. Female Genital Mutilation/Cutting in Children and Adolescents: Illustrated Guide to Diagnose, Assess, Inform and Report. Cham (CH): Springer; 2022.

Les aquarelles ont été évaluées dans une étude comparant l'auto-évaluation par les femmes de leur type de MGF/E avec la classification de l'OMS établie lors d'un examen spécialisé.



Hunziker L, Locher S, Abdulcadir J. Concordance between self-assessment using watercolor illustrations and clinical examination: implementing a visual tool to improve recognition and communication on female genital mutilation/cutting. J Sex Med. 2026 Jun 5;23(7):qdag190. doi: 10.1093/jsxmed/qdag190

¹ Dans ce document, les termes « professionnel de santé » et « utilisateur » sont employés au masculin générique afin de faciliter la lecture. Ils désignent indifféremment les personnes de tous les genres.

ACCÉDER À L'OUTIL

Les utilisateurs peuvent commencer par ouvrir l'application web FSAT :

 <https://fsat-app.github.io>


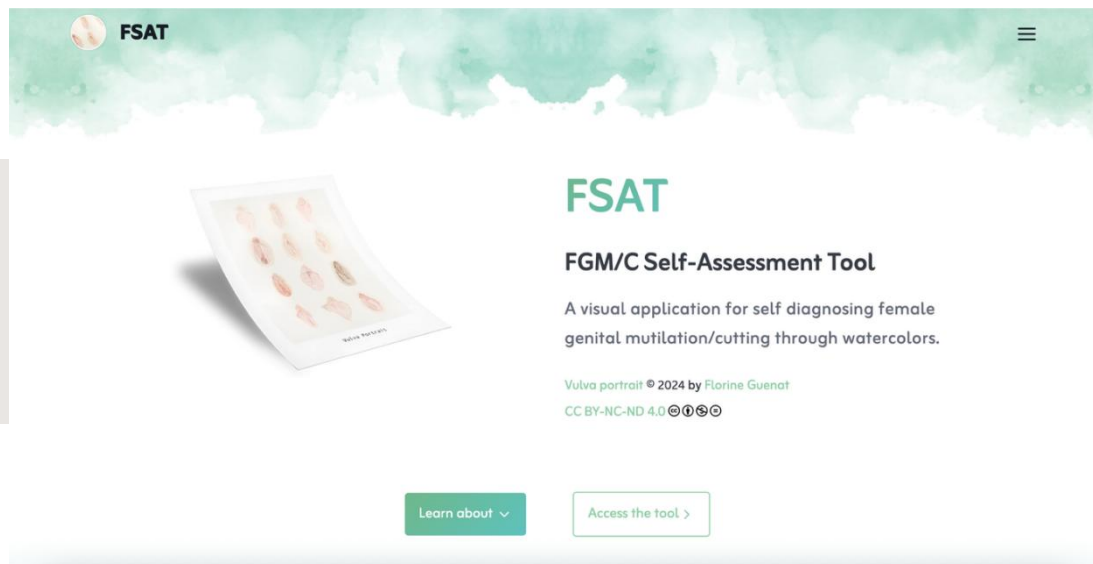


Figure 1- Page d'accueil

Depuis la page d'accueil, cliquez sur **Access the tool**. Cela ouvre la page d'accès principale où les utilisateurs doivent choisir entre deux parcours :

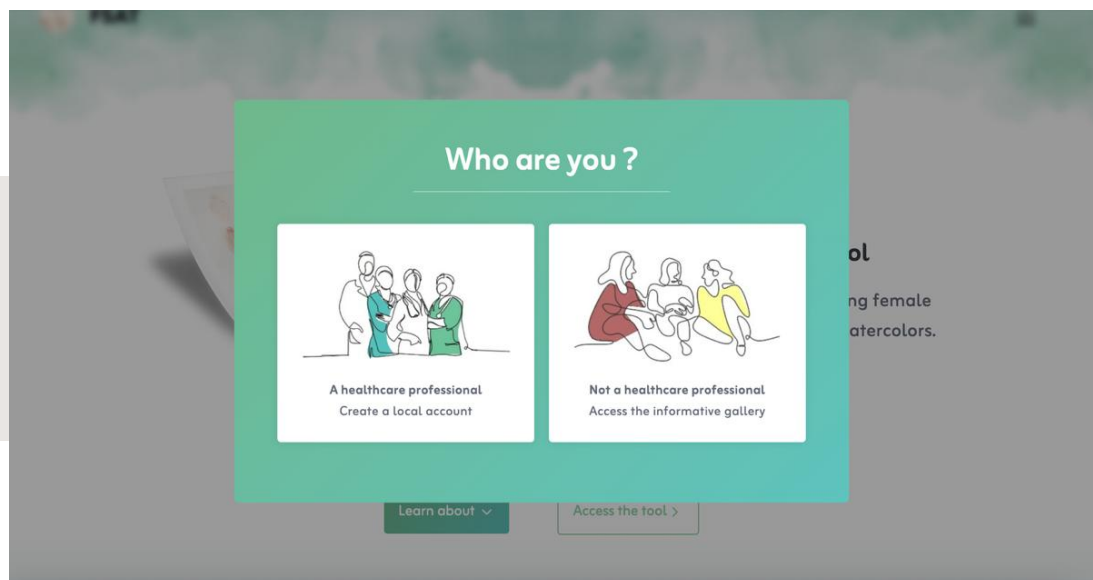

Cette étape permet d'orienter les utilisateurs vers la section la plus adaptée à leurs besoins.

FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS

Étape 1 – Créer un compte personnel


Les professionnels de santé doivent d'abord créer un **compte local personnel**. Ce compte est stocké **uniquement dans le navigateur web utilisé** et n'est accessible que sur cet appareil. Aucune donnée n'est transmise en ligne.

Figure 2 – Page de création de compte

Ce compte local permet une utilisation sécurisée et respectueuse de la confidentialité de l'outil. Il peut ainsi également être utilisé **dans des environnements à connexion internet limitée ou inexistante**.

Étape 2 – Démarrer une nouvelle session

Cet outil est conçu pour être utilisé pendant les consultations médicales afin de favoriser la communication avec les patientes. Cliquez sur « **New Session** ».

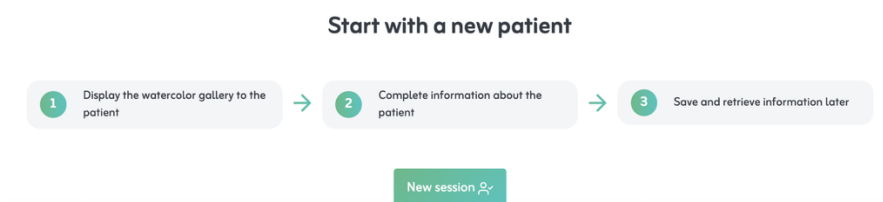

À ce stade, le professionnel de santé remet l'appareil (ordinateur, tablette ou smartphone) à la patiente.

La patiente est invitée à regarder **la galerie d'images** et à sélectionner l'image qui ressemble le plus à son anatomie.

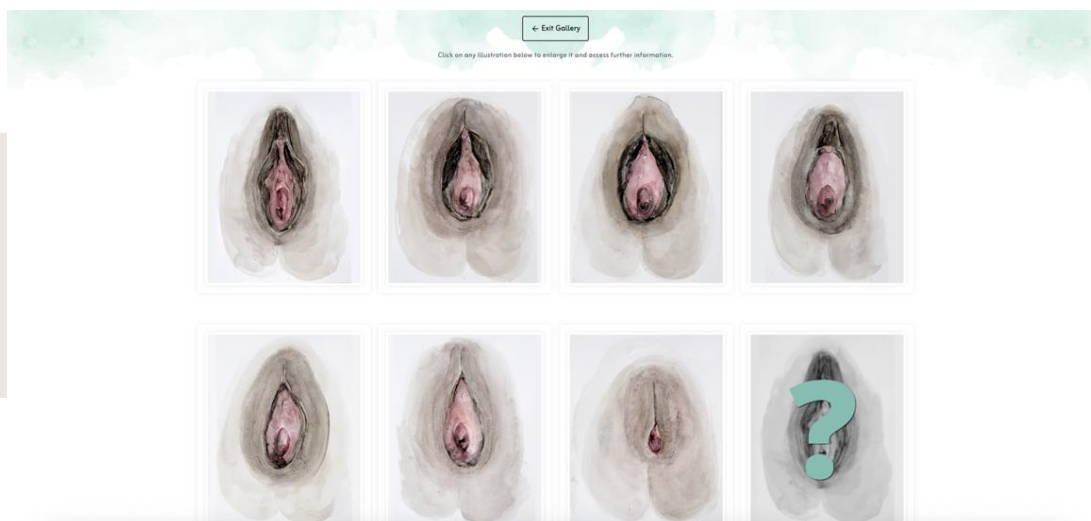


Figure 3 – Galerie d'images

Une fois l'image sélectionnée, l'appareil est rendu au professionnel de santé.

Étape 3 – Compléter les informations de la patiente

Le professionnel de santé peut alors compléter la section des informations de la patiente. Veuillez **compléter toutes les informations pertinentes concernant la patiente** après la sélection de l'image.

Figure 4 - Page d'informations de la patiente

Étape 4 – Parcourir vos données

Après la consultation, cliquez sur « **Explore Your Data** ».

Cette section propose une vue d'ensemble des données recueillies via l'application.

Les professionnels de santé peuvent explorer **des graphiques et diagrammes récapitulatifs** basés sur les données des patientes, tels que **les types de MGF/E, les pays d'origine, l'âge actuel et l'âge lors des MGF/E**.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour obtenir une vue d'ensemble de la population de patientes et éventuellement suivre l'incidence et la prévalence des MGF/E.

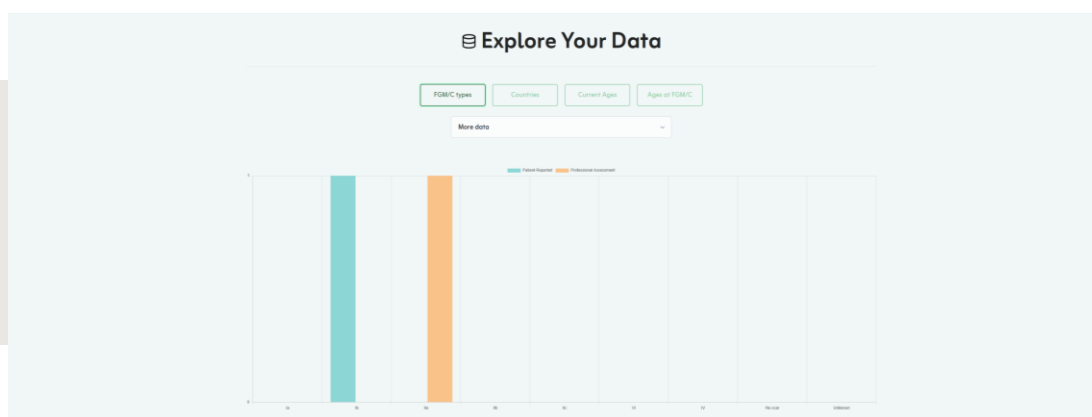


Figure 5 - Tableau de bord « Explorer vos données »

Étape 5 – Données des patientes enregistrées et exportation

Sous le tableau de bord de visualisation des données, les professionnels de santé peuvent accéder à la **liste des patientes enregistrées sur l'appareil local**.

Cette section permet de consulter les sessions de patientes précédemment enregistrées, stockées directement sur l'appareil.

Les informations des patientes restent accessibles via l'application, y compris dans des environnements à connexion internet limitée ou inexistante.

Les données peuvent également être exportées au format **.csv** ou **.xlsx** à des fins de suivi clinique, de documentation ou de recherche.

Toutes les données exportées sont **pseudonymisées** afin de contribuer à la protection de la confidentialité des patientes.

Étape 6 – Contribuer à la recherche

L'outil permet également aux utilisateurs de contribuer à des projets de recherche en cours.

En cliquant sur « **Synchroniser** », les données peuvent être partagées de manière sécurisée avec [l'équipe de recherche de la consultation MGF/E](#) de **l'Université de Genève (Suisse)**.

Toutes les données transmises en ligne sont **anonymisées**, et seuls les dossiers pour lesquels un consentement explicite a été fourni seront partagés.

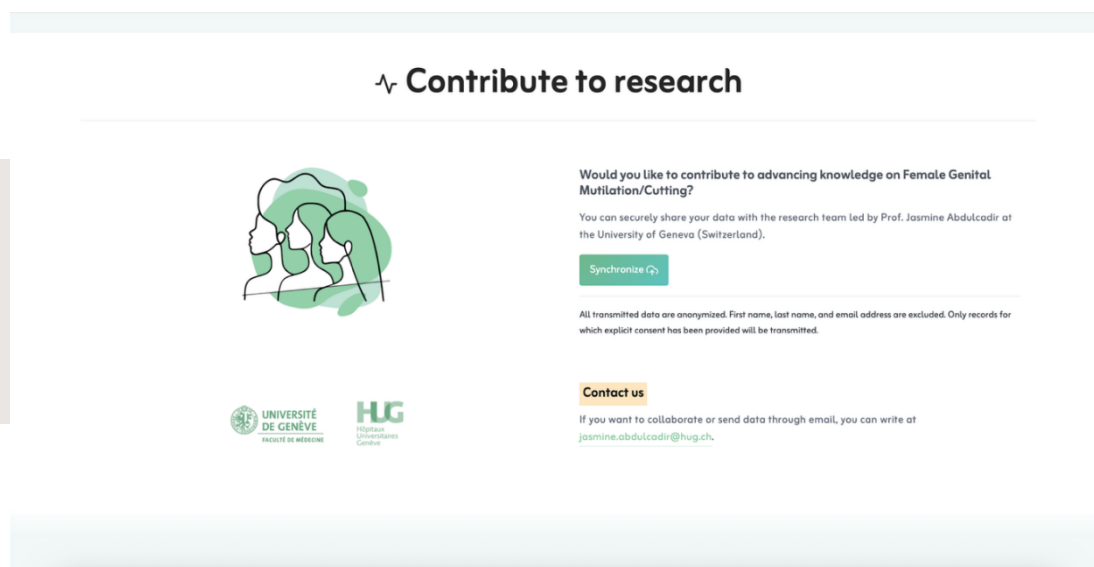


Figure 6 – Bouton « Synchroniser »

USAGE ÉDUCATIF POUR LE GRAND PUBLIC

Usage éducatif

Depuis la page « **Access the tool** », cliquez sur « **Not a Healthcare Professional** ».

L'application peut alors être utilisée en dehors d'une consultation médicale.

Cette section est conçue pour toute personne souhaitant en savoir plus sur l'anatomie génitale externe et les différents types de MGF/E.

Les utilisateurs peuvent accéder à la **galerie d'illustrations**, parcourir les aquarelles et cliquer sur chaque illustration pour l'agrandir et obtenir davantage d'informations.

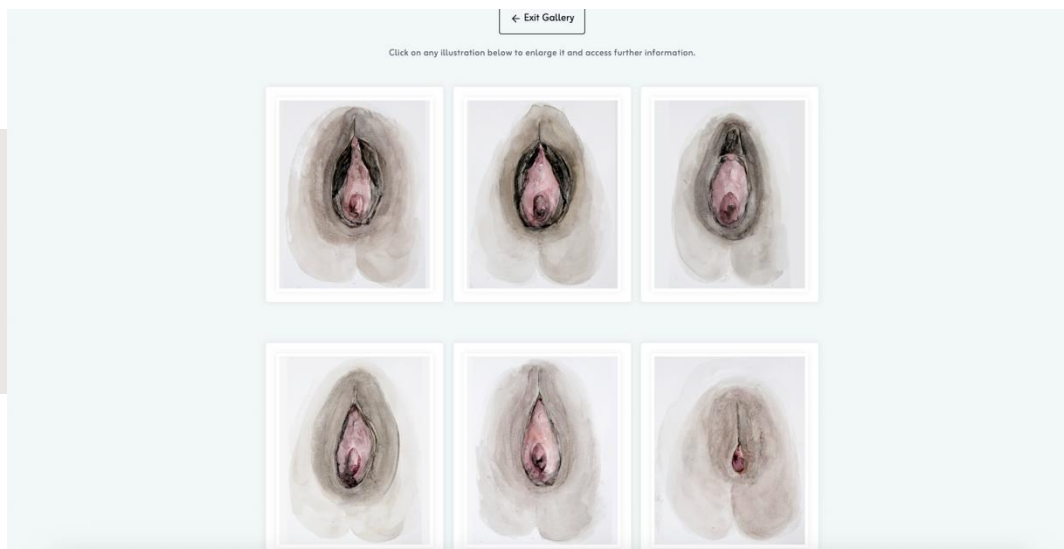


Figure 7 - Galerie d'illustrations

Pour chaque illustration, le schéma explicatif de l'OMS correspondant est affiché à côté de l'aquarelle.

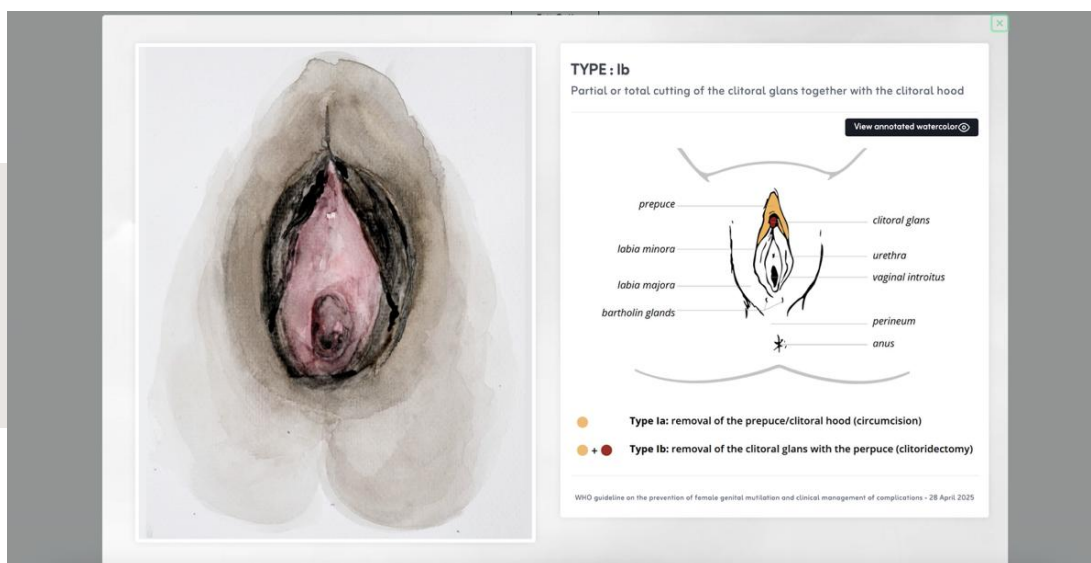


Figure 8 - Aquarelle et schéma de référence de l'OMS

Les utilisateurs peuvent ensuite cliquer pour afficher une version annotée de l'aquarelle, permettant une comparaison directe entre la représentation artistique et les structures anatomiques annotées.

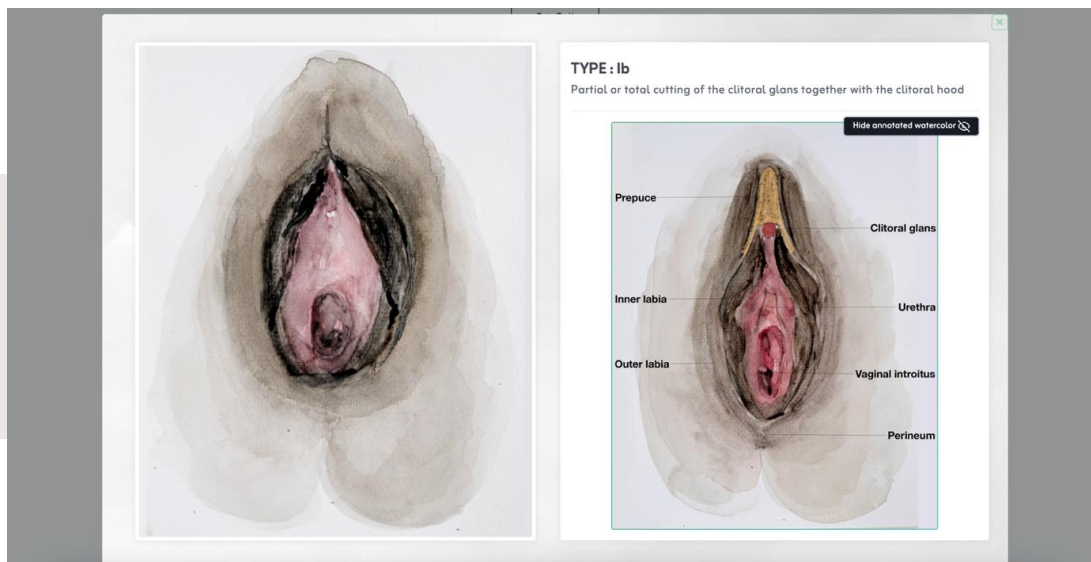


Figure 9 - Aquarelle et aquarelle annotée

FONCTIONNALITÉS CLÉS

- **Stockage local sécurisé des données**

Patient data are stored directly on the device.

- **Accessibilité hors ligne**

L'outil reste fonctionnel dans des environnements à connexion internet limitée ou inexistante.

- **Communication visuelle centrée sur la patiente**

Les illustrations à l'aquarelle facilitent la communication pendant les consultations

- **Schémas éducatifs basés sur l'OMS**

Les utilisatrices peuvent comparer les illustrations avec les schémas de référence de l'OMS et les vues annotées.

- **Export de données pseudonymisées**

Les données peuvent être exportées aux formats .csv et .xlsx.

- **Contribution à la recherche**

Les données peuvent être synchronisées en toute sécurité avec l'équipe de recherche, sous réserve de consentement.

CRÉDITS

Cet outil a été co-développé par Laleh Hunziker, Sophie Locher, Julien Da Costa et Jasmine Abdulcadir des [Hôpitaux Universitaires de Genève](#) et [Université de Genève](#).

Contact

Prof. Jasmine Abdulcadir
jasmine.abdulcadir@hug.ch

